



ООО НТЦ "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

WED-2000 AV Ультразвуковой диагностический сканер


ЦЕНА

по запросу



Категории:

УЗИ аппараты для ветеринарии
Аппараты УЗИ для животноводства
Аппараты УЗИ для ветеринарных клиник
Оборудование для животноводства и
воспроизводства сельскохозяйственных
животных
Оборудование для ветеринарных клиник

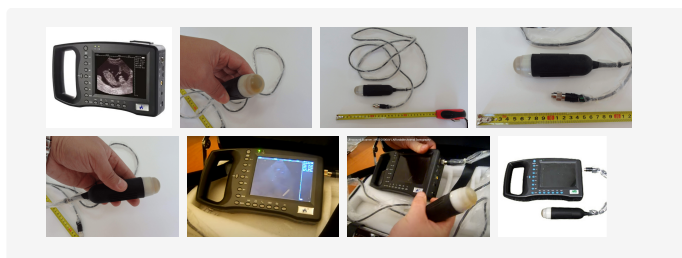

Описание

Портативный сканер WED-2000 AV предназначен для обследования внутренних органов в режиме реального времени с возможностью фиксации изображения для последующего анализа и измерения. Ветеринарный УЗИ сканер — это оптимальный инструмент для ультразвуковой диагностики патологий и акушерских исследований крупных и мелких животных.

Ультразвуковой диагностический сканер WED-2000 AV предназначен для:

- ранней диагностики беременности и жизнеспособности плода у самок всех видов сельскохозяйственных и домашних животных
- обследования половой системы самцов и самок всех видов сельскохозяйственных



ООО НТЦ "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

и домашних животных

- определения оптимального времени для осеменения
- диагностики акушерских и гинекологических заболеваний
- обследования органов, систем органов, костей, мышечных тканей, сосудов, мозга, измерения толщины шпика и т.д.

Назначение

Назначение компактного ультразвукового сканера WED 2000 AV — диагностика внутренних органов животных, выявление стельности на ранних этапах в целях коррекции рациона, изменения режимов кормления и содержания.

Встроенный аккумулятор позволяет проводить УЗИ- диагностику непосредственно «в поле», в деннике, в коровнике.

Характеристики

Метод сканирования	Механическое секторное сканирование
Частота зонда	2,5 MHz, 3.5MHz, 5.0MHz
Глубина отображения	≥190мм
Регулировка изображения	регулировка яркости, контрастности
Обработка изображения	Сглаживание, Псевдо-цвет и гистограмма
Измерение	расстояние, периметр, площадь, объем, измерение гестационного возраста лошадей, коров, баранов, свиней, кошек, собак и других животных
Экран	5"
Емкость батареи	≥2200mAh